


# Dojič zvierat UDDERLY EZ™



Videá/návody pre  
kravu-kozu-ovce

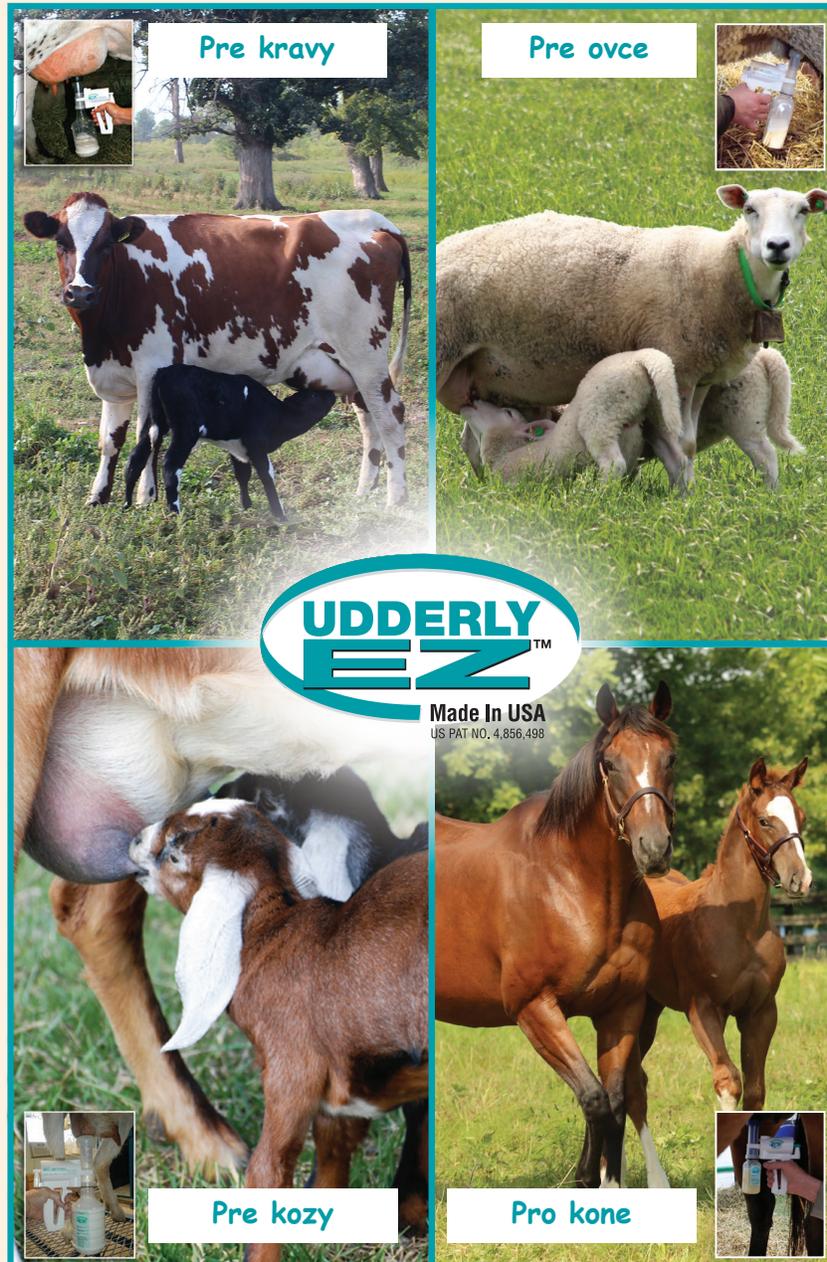

Videá/návody o  
produktoch pre kone

Navštívte našu webovú stránku pre online živé videá

[youtube.com/udderlyez1](https://youtube.com/udderlyez1)

Bezplatne: 1-800-287-4791

Telefón: 515-332-1782

[info@udderlyez.com](mailto:info@udderlyez.com)

[www.udderlyez.com](http://www.udderlyez.com)

Mobilný telefón: 859-368-9509

\* Pred použitím zariadenia si prečítajte zásady vrátenia tovaru na zadnej strane

**Blahoželáme vám k zakúpeniu dojičky UDDERLY EZ!** Poskytne vám vynikajúci výkon a spoľahlivosť pri extrakcii mlieka a mledziva pre:

- kŕmenie novorodenca
- odber mlieka alebo mledziva od matky novorodenca alebo ošetrovateľského zvierat'a na okamžité použitie
- odber mlieka alebo mledziva od matky novorodenca alebo ošetrovateľského zvierat'a na uskladnenie v banke na mlieko/mledzivo a pravidelné dojenie zvierat

Všetko uvedené je možné dosiahnuť s minimálnym úsilím a vysokým stupňom bezpečnosti. Postupujte podľa týchto jednoduchých krokov pri montáži a prevádzkových postupoch dojičky UDDERLY EZ.

### ZOSTAVA EZ

1. Predtým, ako sa pokúsíte začať dojiť, prečítajte si túto brožúru s pokynmi.
2. Zarovnajzte kuželovitý koniec konektora fľaše so zasúvacím otvorom na pumpe a pripojte ich; kusy sa navzájom uzamknú.
3. Naskrutkujte priehľadnú plastovú fľašu s gumovým O-krúžkom na valec; musí to byť pevné uchytenie, aby sa zabránilo akémukoľvek úniku vzduchu.

**VÝSTRAHA: NENASKRUTKUJTE zberné fľaše na zberné skúmavky, keď sú skúmavky pripojené k konektoru pumpy. Utiahnutie fľaše, keď je extraktor pripojený k čerpadlu, spôsobuje neprímeraný tlak na diely a môže zlomiť svorky. NAJPRV zoskrutkujte zberné fľaše a zberné skúmavky a potom ich pripojte k čerpadlu.**

4. Uchopte pumpu a zasuňte svorky konektora fľaše medzi vodiace hrebene na zbernom valci; kusy sa navzájom uzamknú.
5. Ako preventívne opatrenie jemne stlačte valec a pumpu, aby ste zaistili pevné sedadlo oboch jednotiek.
6. Položte ústie extraktora na päť ruky a pumpu, aby ste sa uistili, že pumpa vytvára potrebné vákuum. Ak sa vákuum nevytvorí, zopakujte kroky 2 a 4 uvedené vyššie.

Valec na extrakciu mlieka a mledziva Udderly EZ sa dodávajú v jednej veľkosti #2.

Silikónové náplne sú farebne označené a dodávajú sa v 3 veľkostiach. Všetky sa zmestia do valca z tvrdého plastu č.2. Malé na umiestnenie malých alebo panenských kobyliiek, lamy, oviec, kôz, hovädzieho dobytku atď. Stredné pre staršie cumlíky strednej veľkosti a veľké pre veľké cumlíky na kravách, ťavách a kobyľách. Väčšina našich súprav sa dodáva s nafúknutím malej a strednej veľkosti. Ak potrebujete väčšiu veľkosť, objednajte si ju v čase odoslania. (je dobré mať všetky tri po ruke v prípade, že je potrebná iná veľkosť.)


Vezmite prosím na vedomie: Uistite sa, že silikónová vložka (vložka) je bezpečne usadená v extrakčnejhadíčke č.2. Nakloňte ho mierne nad hornú časť plastovej trubice a zatlačte nadol smerom k druhej strane a pevne sa posadí nad hornú časť plastovej trubice.

### ČISTENIE DOJIČKY UDDERLY EZ

Vyčistite dojničku čo najskôr po každom použití. Časť čerpadla dojiča sa ľahko zapína a vypína, čo umožňuje ľahké čistenie častí dojiča. Po každom použití by sa extrakčný valec a fľaša na zber plastov mali ponoriť do roztoku na čistenie teplou vodou. Môžete pridať dezinfekčný prostriedok alebo malé množstvo chlórovaného čistiaceho prostriedku alebo bielidla (nie viac ako 1 diel bielidla na 10 dielov vody). **DŮKLADNE očistite a OPLÁCHNITE a nechajte uschnúť.** Môžete vyčistiť celú vonkajšiu stranu dojiča pomocou utierok Udderly EZ (**POZNÁMKA: Nikdy nevaríte žiadnu z plastových zberných fliaš. Varenie ich odohreje a urobí ich zbytočnými. Pri správnej dezinfekcii nie je potrebné prevárať. FLAŠE NIKDY NEVKLADAJTE DO UMÝVAČKY RIADU.**)

Nezabudnite, že čierny O-krúžok sa musí po vyčistení vrátiť na okraj zberných fliaš.

**DOJIČKA UDDERLY EZ NEBUDE FUNGOVAŤ BEZ O-KRÚŽKU.**

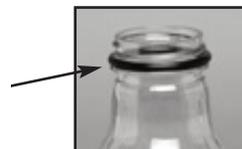

### ČISTIACA PUMPA, AK SA MLEDZIVO DOSTANE DOVNÚTRA

V prípade, že sa do zostavy pumpy dostane mledzivo alebo mlieko, mali by ste ho čo najskôr vyčistiť. Celé čerpadlo ponorte do teplej jemnej mydlovej vody alebo čistiaceho roztoku (pH 7-8), pridajte štyri až šesť polievkových lyžíc sódy bikarbóny a prečerpajte ho cez čerpadlo. Potom proces zopakujte s teplou čistou vodou, prečerpajte ho cez čerpadlo, vytlačte vodu, pretrepte ho a nasajte vzduch cez čerpadlo, aby ste ho pomohli vysušiť vnútorne, utrite a nechajte vyschnúť. Nikdy nenechávajte pumpu stáť cez noc alebo dlhší čas, ak bola kontaminovaná mledzivom alebo mliekom. Mledzivo je veľmi husté a lepkavé a môže zničiť zostavu pumpy, ak sa nechá nastaviť. **V TEJTO PUMPE NIKDY NEPOUŽÍVAJTE ŽIADNY ALKOHOL ALEBO PRODUKTY NA BÁZE ALKOHOLU!**

### ROZMRAZOVANIE MRAZENÉHO MLEDZIVA

Na rozmrazenie mrazeného mledziva nikdy nepoužívajte mikrovlnnú rúru, pretože by to zničilo protilátky. Fľašu s mledzivom umiestnite do umývadla s teplou vodou a nechajte pomaly rozmraziť.



Nové aktualizované diely pre obe dojičky Ez



Zobrazené s veľkým nafúknutím kravského mlieka



Všetky tri nafúknutia veľkosti sa zmestia do valca č.2.



Prosím, ukážte s ovčím a kozím silikónovým nafukovaním a 8 oz. fľašou

# PROCES EXTRAKCIE MLIEKA ALEBO MLEDZIVA

OVCE



KRAVY




KONE



KOZY



1. Vždy vyčistite oblasť vemena pomocou utierok Udderly EZ, ktoré sú súčasťou vašej súpravy, aby ste odstránili všetky nahromadené nečistoty a baktérie.
2. Jemne odstráňte voskovú zátku z konca cumlíka, aby nespadla do fľaše.
3. Manuálne odstráňte každý cumlík aspoň dvakrát, aby ste začali s dobrým prietokom mlieka. Tým sa odstránia všetky baktérie, ktoré môžu byť prítomné.
4. Silikónové nafúknutie umiestnite priamo na cumlík a jemne zdvihnite pumpu proti vemenu.
5. Stlačte rukoväť aspoň 2-3 krát, čím sa spustí proces vákuového utesnenia a jednotka sa uzamkne na vemene zvierat'a. Teraz nechajte fľašu spadnúť, pretože pracuje mimo vákua a gravitácie.
6. Akonáhle začne prúdiť mlieko, prestaňte pumpovať! Keď sa prietok spomalí, začnite znova čerpať. Možno budete musieť zopakovať túto sekvenciu 3-4 krát.
7. Ak chcete uvoľniť vákuum na čerpadle, zatlačte fľašu dozadu smerom k ručnému spúšťaču, aby ste uvoľnili vákuový Čerpadlo nevyťahujte z vemena.
8. Pri prvom dojení sa zvyčajne nazhromaždí medzi 8 - 12 uncami mledziva, aj keď sa to môže líšiť v závislosti od druhu alebo plemena zvierat'a.
9. Ak matka okamžite nedovolí mlieko, možno budete musieť jemne masírovať jej vemeno, aby ste začali s prietokom. Celé čerpadlo a fľašu zatlačte do vrečka (ako bábätko počas dojčenia) a nechajte váhu ustáliť a dávajte pozor, aby ste neporušili vákuové tesnenie. Čerpadlo pracuje mimo vákua a gravitácie.
10. Zbernú fľašu nepreplňujte, plňte len po vyznačenú čiaru na fľaši. Čerpadlo nikdy nenakláňajte dozadu. To umožní, aby mlieko alebo mledzivo vniklo do otvoru na prívod vzduchu a poškodilo membránu v čerpadle.
11. Vložte gumovú malú bradavku priamo do 8-uncovej fľaše alebo veľkú bradavku s krúžkom naskrutkovaným na 18-uncovú fľašu a podávajte priamo novorodencovi. Všetky naše fľaše sú bezpečné pre mrazničku, stačí ich zakryť uzáverom a vložiť do mrazničky. **NEROZMRAZUJTE V MIKROVLNNEJ RÚRE!! TO ZABIJE PROTILÁTKY!!**

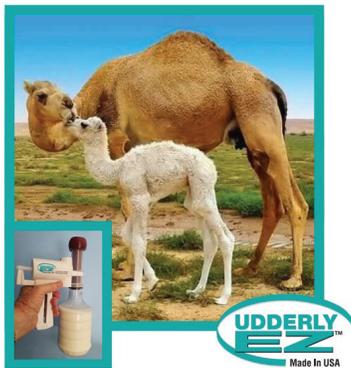

Udderly Ez Milker™ pre ťavy  
Udderly Ez Milker™

Vyrobené spoločnosťou Wheeler Ent., Inc.  
1309 Saddle Club Way  
Lexington, KY 40504  
Telefón: 800-387-4791 • 859-368-9509  
Webová stránka: [www.udderlyez.com](http://www.udderlyez.com)  
E-mail: [info@udderlyez.com](mailto:info@udderlyez.com)



WHEE-10  
CAMEL  
EZ2006



DOJIČKA ŤAVY UDDERLY EZ  
Dojič Udderly Ez Camel bol použitý na ťavách v Spojených arabských emirátoch a v 4 zariadeniach na dojenie tiav v USA. K dispozícii máme aj elektrický dojací stroj Ultimate Ez a tri farebne odlišné silikónové nafukovacie zariadenia, ktoré sú vhodné pre všetky veľkosti cumlíkov.

[www.udderlyez.com](http://www.udderlyez.com) viac informácií a celý rad videí nájdete NA:  
[www.youtube.com/udderlyez1](http://www.youtube.com/udderlyez1)

## UDDERLY EZ™ FLAŠE NA ZBER MLEDZIVA/MLIEKA

Špeciálne navrhnuté priehľadné plastové priehľadné fľaše na mledzivo s objemom 8 oz, 18 oz alebo 1 liter s gumeným O-krúžkom na vrchu, aby sa zabezpečilo vákuum po pripojení k Udderly EZ Milker. Uzáver má tesniace tesnenie vložky. Ideálne na zmrazenie mledziva a skladovanie na budúce použitie alebo na prenos mledziva do dojčiacej fľaše na okamžité použitie.



8 oz fľaše na mledzivo  
#EZ814



2 Pk 18 Oz fľaše  
#EZP02



2 Pk Qt. Fľaše  
#EZQ02

Ďakujeme, že ste si zakúpili dojičku UDDERLY EZ, najbezpečnejšiu a najefektívnejšiu veľkú zbierku domáceho a exotického živočíšneho mlieka a mledziva, ktorá je k dispozícii. Používa sa na kone, poníky, ovce, kozy, lamy, alpaky, zebry, ťavy a kravy. Udderly EZ je tiež najúčinnjším ručne ovládaným mliečnym výrobkom na dnešnom trhu. Táto patentovaná vákuová pumpa sa vyrába len z najkvalitnejších skonštruovaných plastov a je zostavená podľa prísnych vládnych noriem kontroly kvality zdravotníckych pomôcok. Všetky fľaše majú záruku FDA pre čtre nádoby z kopolyesteru. Všetky fľaše vyrobené výslovne podľa vzoriek na použitie na Udderly EZ Milker. Sú vyrobené z čireho kopolyesteru a spĺňajú požiadavky na zloženie a vlastnú viskozitu podľa existujúcich nariadení FDA USA pri 21 CFR 177.1315 pre všetky potraviny.

Vynaložili sme maximálne úsilie na to, aby sme počuli, vzdelali a vysvetlili náš Udderly EZ™ Milker vrátane bezplatného inštruktážneho DVD.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto produktu alebo ak máte pochybnosti o jeho vhodnosti na váš účel, **OBRAŤTE SA NA SVOJHO VETERINÁRNEHO LEKÁRA**

Namiesto všetkých záruk, výslovných alebo predpokladaných, sa poskytujú: Jedinou povinnosťou predávajúceho a výrobcu je nahradiť také množstvo výrobku, ktoré sa ukázalo ako chybné. Predávajúci ani výrobca nenesú zodpovednosť voči používateľovi alebo akejkoľvek inej osobe podľa právnej teórie, vrátane, ale nie výlučne, nedbanlivosti alebo objektívnej zodpovednosti, za akékoľvek priame alebo následné škody, ktoré utrpeli alebo vznikli z dôvodu používania výrobku alebo inak. Pred použitím musí používateľ určit vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie a používateľ preberá všetky riziká a zodpovednosť, ktorá s tým súvisí. Vyššie uvedené nemôžu byť zmenené s výnimkou úradníkov predávajúceho a výrobcu

**POSTUP PRI VRÁTENÍ:** Spoločnosť Wheeler Enterprises Inc. dba EZ Animal Products vymení akékoľvek diely alebo čerpadlo Udderly EZ, ktoré sa ukázali ako chybné pri výrobe, do 30 dní od prijatia nákupu, ak sa používajú v súlade s priloženými pokynmi. Objednávajte prosím opatrne.

# UDDERLY EZ™

## KOŇOVITÉ, OVČIE, KOZIE, KRAVSKÉ, ŤAVIE A EXOTICKÉ DOJIČKY

(Produkty vyrábané výlučne spoločnosťou Wheeler Enterprises, Inc.)



EXKLUZÍVNY DISTRIBÚTOR PRE:  
SLOVENSKO, ČESKÚ REPUBLIKU A POĽSKO

**WALDOS s.r.o.\*\***  
Address : Limbova 3057/16010 07 Žilina, Slovakia, EU  
Contact : Marták Milan MVDr.  
Tel.: +421(0) 944 529 854  
[www.waldos.sk](http://www.waldos.sk)  
[info@waldos.sk](mailto:info@waldos.sk)

„Vďaka všetkým našim používateľom Udderly Ez Milker™ vo viac ako 70 krajinách po celom svete. V júni 2021 bol náš UEZ Milker zaradený do 2. vydania textovej príručky Equine Reproductive Procedures pre študentov veterinárnej medicíny, veterinárnych lekárov a odborníkov.“

Buck Wheeler  
Prezident/CEO  
Majiteľ, Vynálezca, Mfg  
EZ Animal Products

