



STABLEIZER®

SYSTEM ZADRŽIAVANIA A VÝCVIKU KONÍ

PATENTY USA Č. 6 058686 -Č. 6 260 338

VYROBENÉ V USA

HOVORÍ SA, ŽE STABLEIZER® DÁVA PERFEKTNÝ ZMYSEL!

„Stabilizátor“ je najlepší nástroj, s ktorým som sa kedy stretol, aby som ochránil zviera a pomohol vám s ním zaobchádzať. Berieme so sebou všetky kone do paddocku; zvykli sme si brať len al l s retnými reťazami, ale Stableizer® je nastaviteľnejší a predvídateľnejší! Naozaj ich to núti sústrediť sa.“



~ Carl Nafzger
Tréner plnokrvníkov v
Sieni slávy a ocenený
cenou Eclipse

„Pri hodnotení presnej konštrukcie tohto návrhu som zistil, že plastová hadička chrániaca oblasti d'asien a hlavy, úplne atraumatická, vyvíjala tlak na akupunktúrne body, G.V.26 a T.H. 17.



Chvíľa s doktorom Cainom
a Unbridledom, víťazom
Kentucky Derby 1990 a
špeciálnym pacientom.

"G.V.26 (nachádza sa na hornej d'asne medzi dvoma prednými zubami a pod hornou perou) je pri stimulácii bodom uvoľňovania adrenalínu, ale neustály tlak alebo nadmerná stimulácia spôsobuje blokádu a následný sedatívny účinok. Plastová farebná čelenka s "gombíkmi", ktoré spadajú pod ucho na oboch stranách, sú adresované T.H. 17, čo je upokojujúci bod, keď je stimulovaný, čo spôsobuje uvoľňovanie endorfinu, ktorý má sedatívny alebo soporikálny účinok. Nie je to ako trieť psa alebo mačku za uchom a pod uchom, čo vyvoláva stav eufórie. Pôsobenie „potiahnite a uvoľnite“ poskytuje

v tomto bode stimulačný účinok a následne požadovaný účinok.

"Kým sa dosiahne požadovaná" zdržanlivosť ", koň podlieha" potešeniu "skôr ako" bolesti ", najúžasnejšie veci sú, že akonáhle sa vykoná počiatočná" desenzibilizácia ", zostáva. Nie je to ako Ace promozín, Torbugisec, Rompun atď., ktorý sa vyčerpáva a v procese nezanecháva žiadnu pamäť. To umožňuje operátorovi vykonať postupy v prijateľnom stave pre koňa bez vytvorenia zlých bunkových spomienok, keď sa postup musí vykonať znova, a umožňuje koňovi zapamätať si akýkoľvek postup alebo tréningovú úlohu, ktorá bola vykonaná s príjemnou asociáciou.“

Marvin C. Cain D.V.M.

Maister akupunkturista, lektor, autor

STREET SENSE

Víťaz ceny Eclipse za rok 2006
Šampión 2-ročný Colt x
2006 Víťaz Chovateľského pohára
2007 Víťaz Kentucky Derby
2007 Víťaz Travers Stakes
2007 Víťaz Jim Beam Stakes



Fotografia Equisport



"Whistlejacket Equine Surgery bežne používa Stableizer® a zistilo sa, že je vysoko účinné používať ho namiesto zaskľbu. Je obzvlášť užitočný pri jednoduchých zákrokoch, ako je odber krvi z žriebäť, zubné plávanie, nervový blok a rozsah. Na rozdiel od skľbania koňa, ktoré môže mať niekedy nepredvídateľné výsledky, sa možno spoľahnúť, že Stableizer® poskytuje účinnú mieru kontroly nad pacientom."

~ Oliver C. Davis, M.R.C.V.S., Whistlejacket Equine Surgery Middle Farm Stable, Poundbury, Dorchester, Dorset, Anglicko

Tlak sa ovláda stlačením červeného tlačidla, ktoré je zaťažené pružinou a používa sa na nastavenie napätia na vedeniach Stableizer®. Jeho funkciou je obmedziť koňovitého športovca a zároveň byť schopný viesť, držať, sedieť, nakladať, jazdiť alebo trénovať koňa, čo je funkcia, ktorú iné typy obmedzení nie sú schopné urobiť.

S týmto tlakom Stableizer® odvádza pozornosť koňa od iných častí tela, na ktorých sa pracuje. Dôkazy ukazujú, že endorfíny a príbuzné zlúčeniny sa uvoľňujú aplikáciou tlaku zášklbov na senzorické nervové centrá. Endorfíny a príbuzné zlúčeniny sú omamné látky, ktoré sa vytvárajú a uvoľňujú z centrálného nervového systému a blokujú uvedenú bolesť z iných častí tela, čo spôsobuje, že kôň sa uvoľní.

V terénnom testovaní Stableizer® sa zistilo, že na väčšine koní to fungovalo prvýkrát. Niektoré kone však môžu vyžadovať dve alebo viac aplikácií, kým sa kôň stane úplne zvládnuteľným.

AKO APLIKOVAŤ A POUŽÍVAŤ STABLEIZER®

Postupujte podľa týchto šiestich (6) jednoduchých krokov

(Identifikácia dielu pozri stranu 3, P-5)

Krok č.1: Stlačte červené tlačidlo na uvoľnenie napätia (A) a posuňte sa smerom k rukoväti (B). To umožní väčší priestor na hlavu pri umiestňovaní nad hlavu koní. Priložte kone cez Stableizer® a po nastavení hornej časti západky (G) pod ľavé ucho prinesiete spodnú alebo plastovú hadičku pod čeľusť a umiestnite ju pod horný okraj (práve opak nasadenia uzdy). (Pozri fotografiu P-1)

Krok č.2: Uistite sa, že posúvate plastové hadičky (C) úplne proti hliníkovej objímke (D) a spodnej kladke (H). Pri aplikácii Stableizer® vždy pracujte na ľavej strane koňa ako pri premostení. Pred použitím vždy skontrolujte plastové hadičky, či nemajú praskliny alebo praskliny.

Krok č.3: Umiestnite farebne potiahnutý kábel (E) cez hlavu tesne za hlasovanie a uši, umiestnite hornú časť západky (G), kde sa pripája ku káblu tesne pod ľavé ucho (v tejto oblasti malého otvoru) (pozri fotografiu P-1). Ľavou rukou umiestnite spodnú časť Stableizer® (s plastovou hadičkou), ktorá drží medzi ľavým palcom a ľavým prostredníkom nahor a pod horný okraj. V tomto okamihu, ak je potrebné Stableizer® nastaviť na väčšiu alebo menšiu hodnotu, pozrite si (Nastavenia červenou farbou) Strana 3, P-6.

Krok č.4: Umiestnite pod horný okraj a súčasne pravou rukou pomaly ťahajte nadol a odstráňte uvoľnenie Stableizer®. Akonáhle je plastová hadička pod horným okrajom, prepnite rukoväť (B) z pravej do ľavej ruky, stlačte a pravou rukou posuňte červené tlačidlo na ovládanie napätia (A) až po hornú časť kladky (F) (pozri fotografiu P-2). V tomto okamihu by mal byť pohodlný, nie tesný. Skontrolujte a uistite sa, že horný okraj je úplne nad plastovým chráničom pier (pozri fotografiu P-3).

Krok č.5: Držte rukoväť Stableizer® (B) pevne, otočte koňa v kruhu doprava (pozri fotografiu P-4), najmenej trikrát zatiahnite za rukoväť a uvoľnite ju, potom otočte v kruhu doľava a vykonajte rovnaký postup, po otočení postavte koňa rovno. Teraz pevne alebo pevne potiahnite rukoväť (B), pretože hlava nastaví tlak a zastaví ďalší postup. Teraz druhýkrát posuňte červené tlačidlo na ovládanie napätia proti hornej kladke. V tomto okamihu nechajte endorfíny pôsobiť aspoň 2 minúty predtým, ako sa pokúsite začať akýkoľvek postup. Ak je potrebné väčšie napätie, vytiahnite rukoväť (B) stlačte

P - 1



P - 2



P - 3



P - 4



a posuňte červené ovládacie tlačidlo (A) bližšie k kladke. Je dôležitejšie, aby ste postupovali presne podľa tohto postupu, pretože počas viac ako troch rokov testovania v teréne sme zistili, že vyššie uvedená metóda priniesla nasledujúce výsledky: (1) kôň vie, že máte kontrolu, (2) endorfíny sa pravdepodobne začínajú uvoľňovať a (3) zvykli si na tlak vyvíjaný v poslednom kroku. Všimnete si, že počas tohto obdobia sa hlava koňa začne znižovať, spodná pera klesne a oči zmäknú a začnú vyzerat' ospalo. Potom ste pripravení pokračovať v akomkoľvek postupe, ktorý sa pokúšate vykonať.

Krok č. 6: Ak chcete vzlietnuť, stlačte a posuňte červené tlačidlo napätia (A) smerom k rukoväti (B) (*Tým sa uvoľní všetok tlak*) a posuňte sa nad hlavu alebo stlačte a posuňte červené tlačidlo nadol a odpojte hornú západku (G).

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: *Predĺžený tlak maximálnej zdržanlivosti po dobu dlhšiu ako 15 minút by mohol mať za následok poškodenie nervov. Stableizer® sa môže používať dlhšiu dobu za predpokladu, že je obmedzovací tlak nižší.*

VEĽMI DÔLEŽITÉ

Ak budete na svojom koni pracovať dlhší čas, Stableizer® je navrhnutý tak, aby ste mohli zmierniť napätie o 1/2 až 3/4 palca stlačením červeného tlačidla (A). Táto voľnosť môže byť vyzdvihnutá pri pokračovaní v akejkoľvek úlohe, ktorú môžete vykonávať, potiahnutím rukoväte (B) a vynulovaním červeného tlačidla (A) proti hornej kladke (F). Nie je potrebné odstrániť Stableizer®.

ÚPRAVY


Váš Stableizer® bol v továrni upravený tak, aby zodpovedal veľkosti koňa, pre ktorý bol navrhnutý. Ak by však vznikla potreba skrátiť alebo predĺžiť veľkosť hlavy Stableizer®, bola navrhnutá tak, aby rýchlo zmenila veľkosť hlavy. (Pozri fotografiu P-6) Postupujte podľa jednoduchých krokov uvedených nižšie alebo si pozrite video, kde nájdete jednoduché pokyny krok za krokom.

Ak chcete nastaviť váš Stableizer®

Hliníková objímka (D) umiestnená na základni jedinej kladky (H) je vašim „jediným nastavením“ na zväčšenie alebo skrátenie veľkosti hlavy Stableizer®.


Podržte jedinou spodnú kladku (H) medzi pravým ukazovákom a palcom, teraz posuňte hliníkovú objímku (D) umiestnenú na základni jedinej kladky späť od kladky. V tomto okamihu môžete pretiahnuť kábel (I) cez hliníkovú objímku. Ak chcete skrátiť, jednoducho pretiahnite šnúru cez objímku a hornú časť kladky z vonkajšej alebo pravej strany. Použite rovnaký postup na zväčšenie, len vytiahnite kábel nadol a cez objímku zo strany kladky a posuňte objímku (D) späť na kladku. Po akomkoľvek nastavení vždy posuňte plastové hadičky (C) pevne proti nastavovacej objímke (D). (Nezabudnite, že Stableizer® musí správne sedieť, aby fungoval správne) **Pozrite si priložené obrázky, aby ste zistili, či správne sedí.** Stableizer® sa dodáva v piatich (5) farebných veľkostiach: Miniatúrne (čierné); malé (modré); stredné (žlté); veľké (červené); extra veľké (oranžové).

P - 5

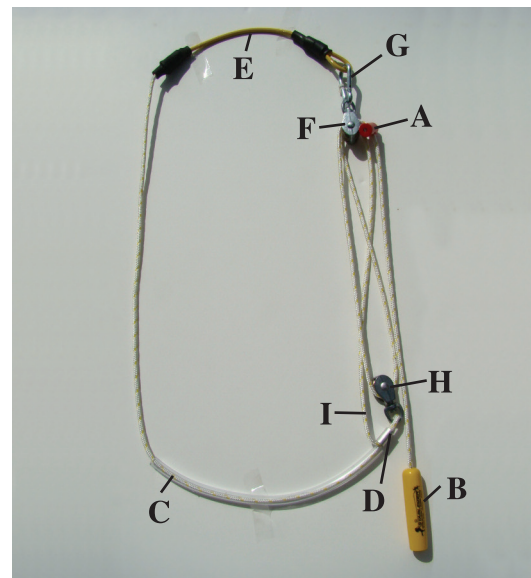

Postupujte podľa príslušných krokov na strane 2 s označenými časťami, aby ste správne nasadili a nastavili Stableizer®.

P - 6

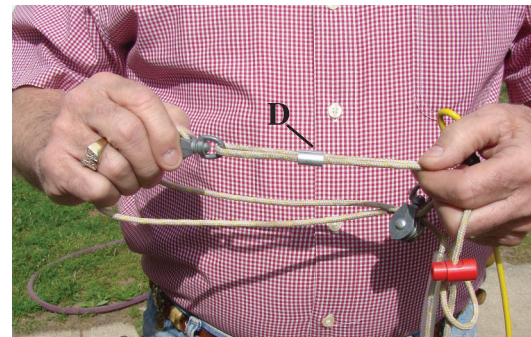

„Veterinári a technici z Dierenkliniek De Morette, Asse, Belgicko používajú Stableizer® posledných 8 rokov a plne podporujú tento produkt. Zistili sme, že je veľmi užitočná pri väčšine procedúr a je veľmi užitočná pri mladých koňoch a žriebätách. Stableizer® som použil namiesto liekov pri aplikácii liečby šokovou vlnou na mnohých koňoch bez akéhokoľvek iného sporu a nedostal som žiadnu reakciu.“
~ Oliver Simon, DVM, konský chirurg, Asse, Belgium Diplomat A.C.V.S.

Stableizer® bol schválený a používajú ho špičkové veterinárne školy, školitelia, profesionáli a jazdci vo viac ako 86 krajinách.



„Stableizer® používame namiesto retiazky na pery alebo záchytku. Väčšina koní si nikdy nezvykne na bolesť spojenú so záchytkou alebo retiazkou na pery. S The Stableizer® si kôň pamätá pocit eufórie alebo pohody — to je veľká výhoda, pretože sa zlepšuje a zlepšuje zakaždým, keď ho používate. S prístrojom Stableizer® aplikujeme injekcie do kĺbov bez použitia liekov. Používame ho na strihanie a na ťažko naložených koňoch. Je to najhumánnejšia metóda, akú máme na zadržanie koňa.“

- Stacey Van Horn, DVM

Equine Vet Associate Clinic,
Grand Island, Nebraska



Stabilizátor učí koňa sústrediť sa, na rozdiel od záchytky, s ktorým dokáže fungovať.
(pozri video na webovej stránke)



„Po použití Stableizer® pred príchodom, Bucka „do Anglicka a využívaní jeho skúseností som zistil, že Stableizer® je veľmi užitočným zariadením pri vlamaní a upokojovaní mladých koní. Použili sme ho na niekoľko ročníkov a zistili sme, že máme pravdepodobne najlepšie vychované kone, s ktorými sme sa kedy museli vysporiadať.“

- Clive E. Brittain

Racehorses, Callburg,
New Market, Anglicko



„Stableizer® používame namiesto liekov ako naše primárne obmedzenie. Je to veľmi humánný spôsob, ako upokojiť kone a umožňuje nám robiť postupy, ktoré na nich potrebujeme urobiť. Keď ho správne aplikujete, môžete vidieť, čo si myslíme, že je uvoľňovanie endorfinu, ktoré ich upokojuje prirodzeným spôsobom a umožňuje im tolerovať postup veterinára. Endorfin je skutočne kľúčom k tomuto prirodzenému obmedzeniu. Myslím si, že Stableizer® je produkt, ktorý sa každý môže naučiť používať a používať bezpečne. Je to jednoduchý produkt, ktorý sa aplikuje na koňa.“

- Joe Noble, DVM

Veterinár, Royal Vista SW,
Purcell, Oklahoma



„Nikdy som nepodporil žiadny produkt, ale určite podporujem tento... Spočiatku som bola veľmi skeptická, ale teraz používam Stableizer® na každom koni, ktorého obujem. A obuv si pamätajú ako príjemný zážitok. Je to nad rámec všetkého, čomu by som kedy uveril.“

- Pete Cote

Federal Journeyman Farrier, Old
Guard Caisson Platoon, U.S. Army,
Ft. Meyers, VA



Stabilizer funguje na osly, muly, exotické zvieratá, ťavy a kone všetkých veľkostí.

Ak sa zdá, že zviera, ktoré sa má dojsť, je počas postupu extrakcie rozrušené alebo nespokojné so svojou manipuláciou alebo odmieta nechať svoju detskú zdravotníčku, odporúčame použiť systém Stableizer®, ktorý bol pôvodne vyvinutý pre kone. Tento zadržiavací systém umožňuje zvieraťu humánne sa upokojiť a poskytuje bezpečnejšie prostredie pre psovod aj dieťa. Upokojujúci účinok tiež pomôže matke pri vypúšťaní mlieka.



Zobrazené so zapnutým Stableizer®.

UPOZORNENIE - Dôležité upozornenie pre kupujúceho Stableizer®!

Pri používaní tohto produktu si prečítajte nasledujúce upozornenia: Nikdy neviazajte koňa pomocou rukoväte šnúry Stableizer®. **NEPOUŽÍVAJTE** koňa bez dozoru, keď je stabilizátor® na svojom mieste. **NEPOUŽÍVAJTE** na žiadnom koni s akýmkoľvek predchádzajúcim poranением hornej časti hlavy alebo úst. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na svojho veterinárneho lekára. Namiesto všetkých záruk, výslovných alebo predpokladaných, sa poskytujú. Jedinou povinnosťou predávajúceho a výrobcu je nahraďovať také množstvo výrobku, ktoré sa ukázalo ako chybné. Predávajúci ani výrobca nenesú zodpovednosť voči používateľovi alebo akejkoľvek inej osobe podľa právnej teórie, vrátane, ale nie výlučne, nedbanlivosti alebo objektívnej zodpovednosti, za akékoľvek priame alebo následné škody, ktoré utrpeli alebo vznikli z dôvodu používania výrobku alebo inak. Pred použitím musí používateľ určiť vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie a používateľ preberá všetky riziká a zodpovednosť, ktorá s tým súvisí. Vyššie uvedené nemôžu byť zmenené s výnimkou úradníkov predávajúceho a výrobcu.

Logo, názov STABLEIZER®, obrázky a všetky názvy týkajúce sa produktu STABLEIZER® sú: Ochranná známka registrovaná, patentovaná a chránená autorskými právami. Žiadne videá, DVD, tovar ani tlačенý materiál sa nesmú predávať ani kopírovať pomocou tohto loga, názvu, obrázkov alebo názvu bez písomného súhlasu alebo udelenia licencie na takéto použitie spoločnosťou Wheeler Enterprises, Inc.


Vyrobené v USA Patent USA č. 6 058 686 *Ostatné patenty v štádiu schvaľovania

NAŠE ZÁRUKY

Ak nie ste úplne spokojní s nákupom zariadenia STABLEIZER®, najskôr zavolať a potom ho vráťte s dokladom o kúpe do tridsiatich dní od dátumu faktúry na výmenu alebo vrátenie peňazí. (BEZ VÝNIMIEK). Poplatky za dopravu sú nevratné. Vlastné objednávky, pásky a DVD nie sú vratné.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto produktu alebo ak máte pochybnosti o jeho vhodnosti na váš účel, **OBRAŤTE SA NA SVOJHO VETERINÁRNEHO LEKÁRA.**

Namiesto všetkých záruk, výslovných alebo predpokladaných, sa poskytujú: Jedinou povinnosťou predávajúceho a výrobcu je nahraďovať také množstvo výrobku, ktoré sa ukázalo ako chybné. Predávajúci ani výrobca nenesú zodpovednosť voči používateľovi alebo akejkoľvek inej osobe podľa právnej teórie, vrátane, ale nie výlučne, nedbanlivosti alebo objektívnej zodpovednosti, za akékoľvek priame alebo následné škody, ktoré utrpeli alebo vznikli z dôvodu používania výrobku alebo inak. Pred použitím musí používateľ určiť vhodnosť výrobku na zamýšľané použitie a používateľ preberá všetky riziká a zodpovednosť, ktorá s tým súvisí. Vyššie uvedené nemôžu byť zmenené s výnimkou úradníkov predávajúceho a výrobcu.

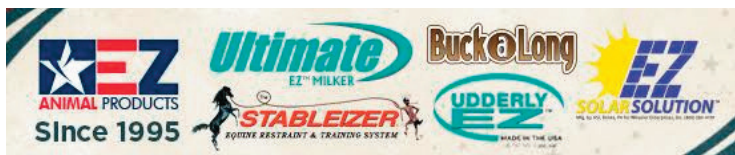

EXKLUZÍVNY DISTRIBÚTOR PRE:
SLOVENSKO, ČESKÚ REPUBLIKU
A POĽSKO

WALDOS s.r.o.**

Address : Limbova 3057/16010 07 Žilina, Slovakia, EU
Contact : Marták Milan MVDr.
Tel.: +421(0) 944 529 854
www.waldos.sk
info@waldos.sk

(Produkty vyrábané výlučne spoločnosťou
Wheeler Enterprises, Inc.)

Navštívte našu webovú stránku pre online živé videá

youtube.com/udderlyez1

info@udderlyez.com

Bezplatne: 1-800-287-4791

www.udderlyez.com

Telefón: 515-332-1782

Mobilný telefón: 859-368-9509

* Pred použitím zariadenia si prečítajte zásady vrátenia
tovaru na zadnej strane